




Linus
Medical

EasySense S9 sensori paigaldamine


www.cgm.ee

www.linusmedical.ee

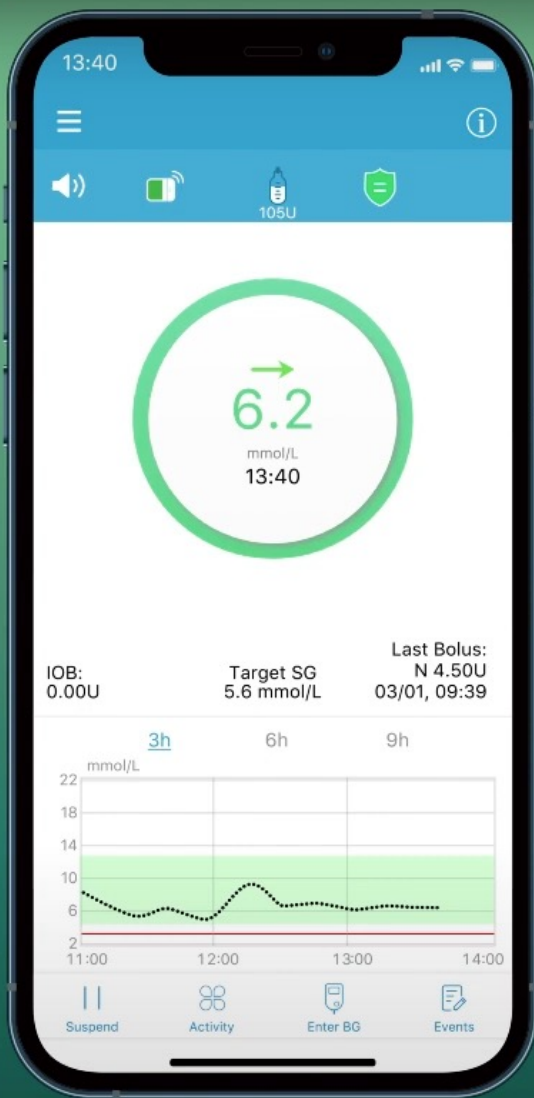

Vajalikud tarvikud:

- Mobiilirakendus EasySense
- Transmitter ehk saatja
- S9 sensor
- Salvrätid naha puhastamiseks (desifintseerivad)

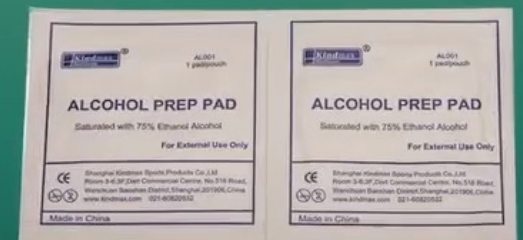

EasySense rakendus


1. Lae alla “Medtrum Easysense mmol/L” rakendus



[Androidi
telefonile](#)




[Apple
telefonile](#)

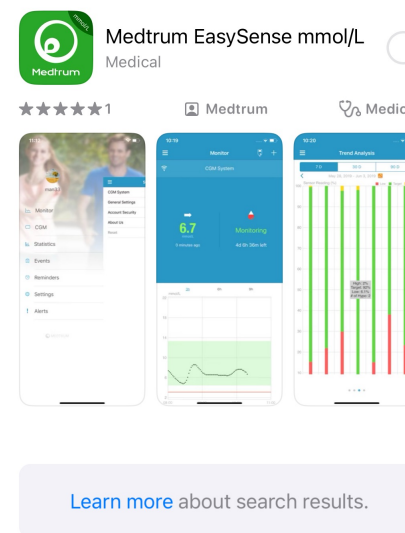

2. Loo konto e-posti aadressiga (vajuta *Register*),
kuhu saad ka kinnituskoodi.

3. Luba kõik ligipääsud (*bluetooth ja notifications*).

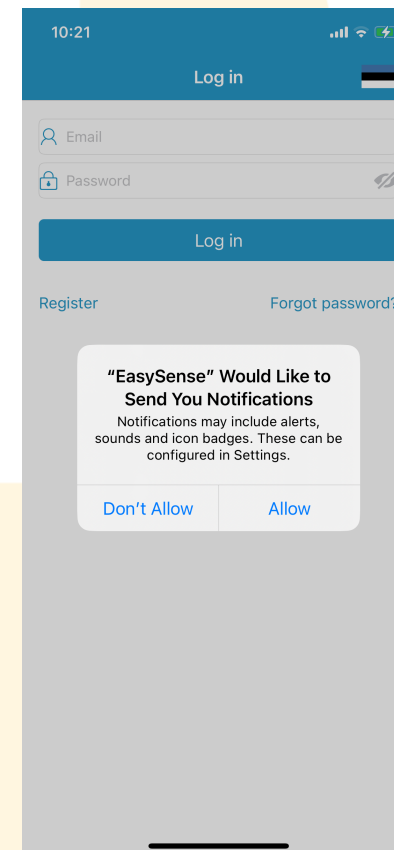

Rakenduse vaade
Apple Store's

Luba seaded (*Allow*)
ja registreeru


Valige rakenduses S9 sensor

4. Peale sisse logimist ava menüüst *Settings* -> *CGM System* -> *CGM type* -> vali **S9**


5. Vali **Add Transmitter**

6. Registreeri saatja QR koodi abil. Kood asub karbi taga.


7. Vali lugemiseks suurem QR kood karbi tagaküljelt või sisesta seerianumber (SN) käsitsi. Vt ka järgmist slaidi.

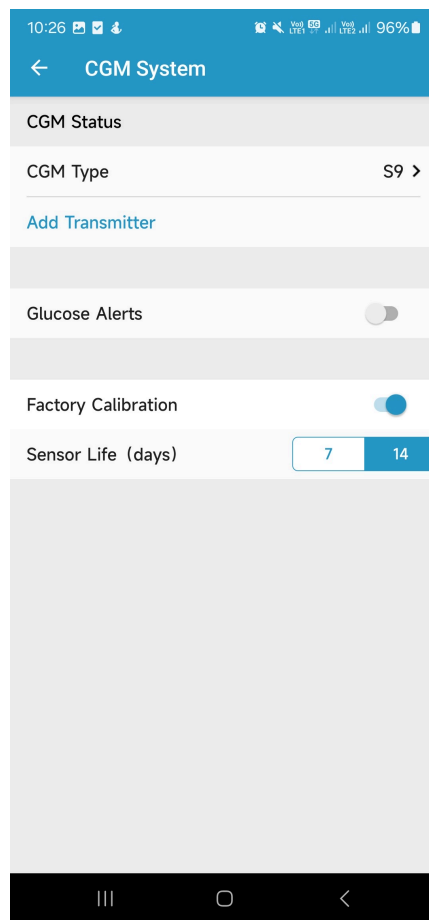

Androidi vaade

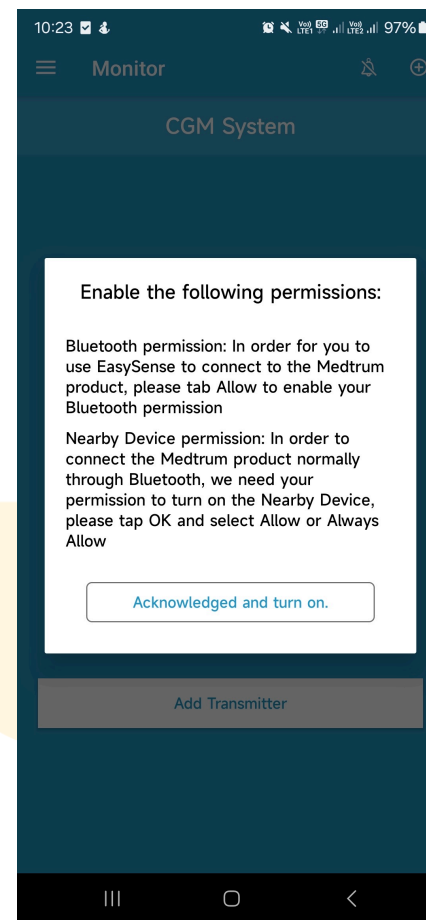

Luba kõik seaded

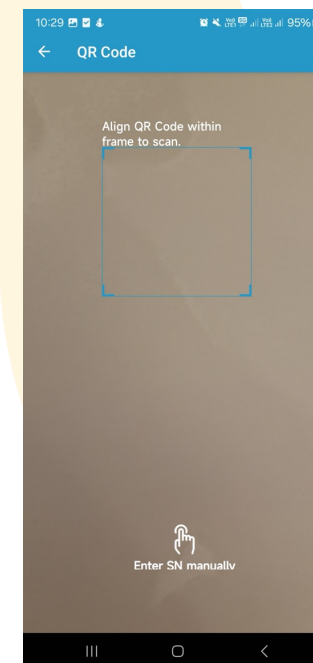

Add transmitter avab kaameravaate, lisa karbi kaanelt QR kood

Saatja ehk transmitteri lisamine

Add transmitter avab kaameravaate,
lisa karbi kaanelt QR kood.

Käsitsi lisamiseks sisesta SN kood.


NB! Ära kasuta pakendil olevat
väiksemat QR koodi.




Kehale kinnitamine

8. Vali asukoht ja puhasta nahapiirkond.

9. Eemalda turvalukk ja kleepsud ning aseta paigaldaja nahale, surudes seda kindlalt vastu nahka.

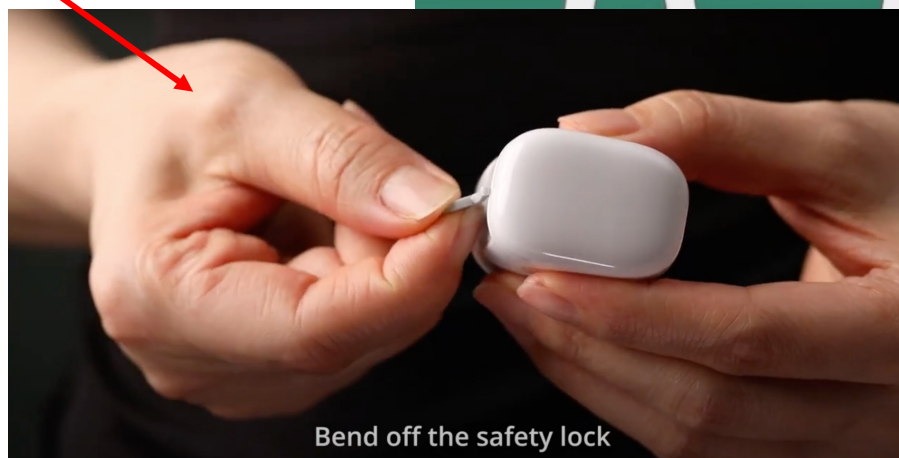


Eemalda turvalukk ja paigaldaja kleepsud

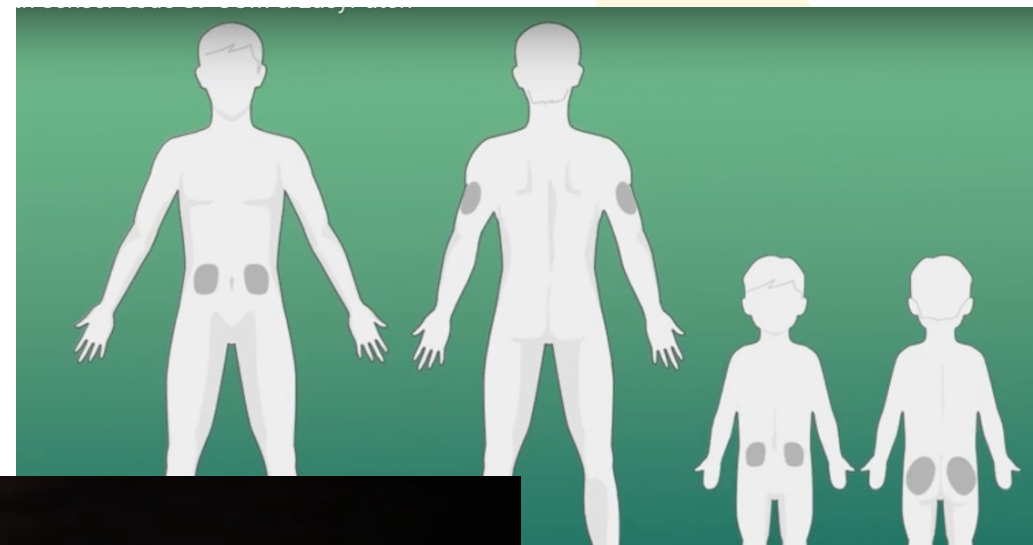

Sensori paigaldamine

10. Vajuta paigaldajal paigaldamise nuppu.


11. Eemalda paigaldaja.

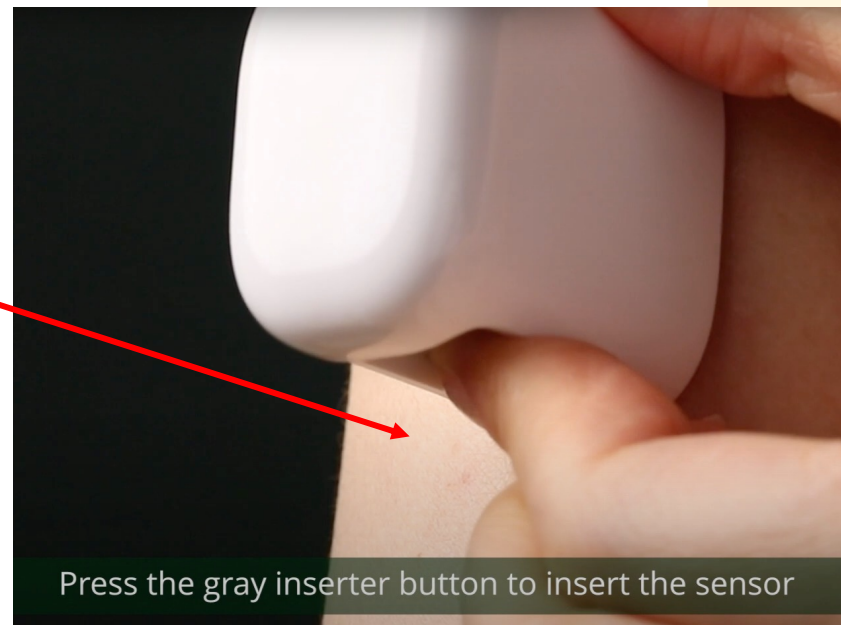

Saatja lukustamine

12. Aseta saatja sensorile ja kontrolli, et saatja on korralikult sensoriga ühendatud (peab käima tugev **klõps** ja sensor ning saatja on pealt tasapinnalised).



13. Jälgi, et roheline tuluks vilgub 3 ja 6 korda (1 min jooksul).

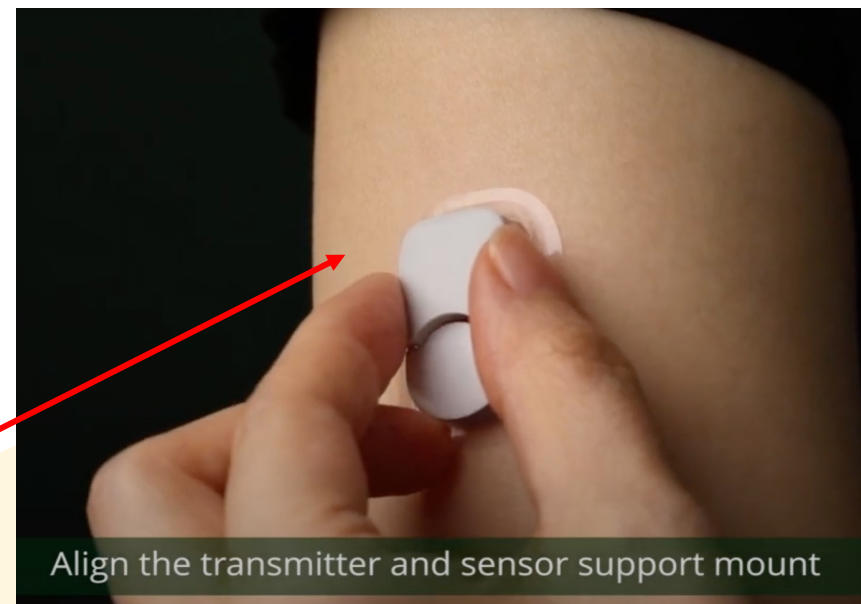

Sensori start

14. Peale saatja vilkumist tuleb rakenduses minna:
menüü -> CGM -> Start sensor

15. Sisesta sensori kood
lugedes QR koodi telefoni
kaameraga või lisa kood
käsitsi.

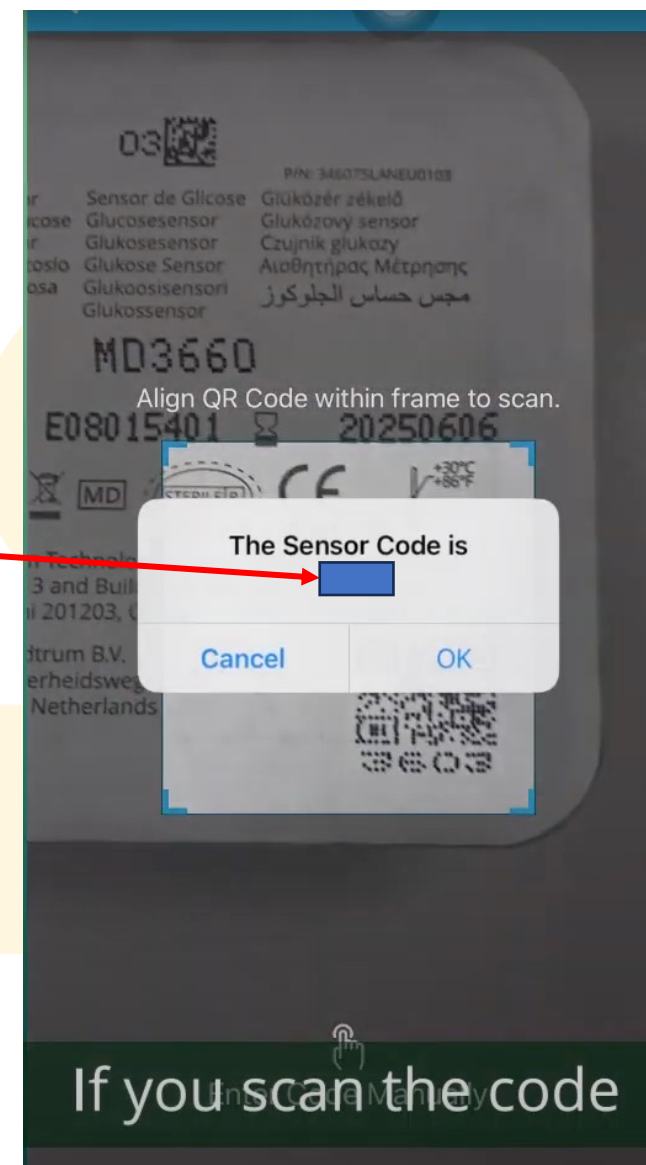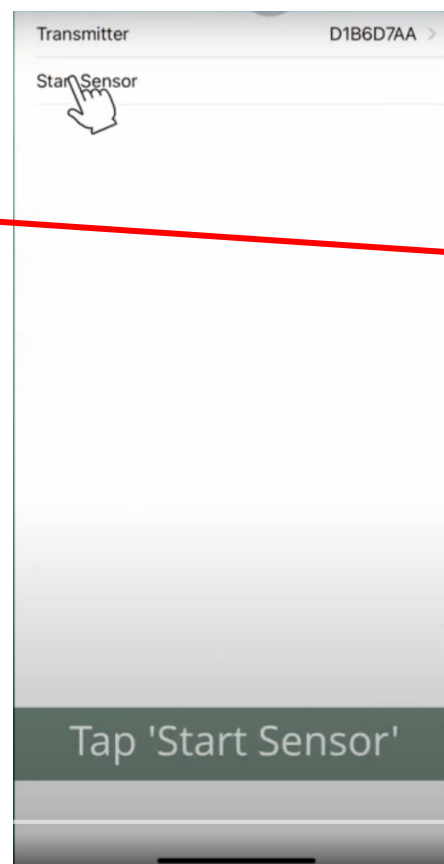



Head kasutamist!

16. Peale sensori koodi sisestamist tuleb rakendusse teade *Warmup* (mis võtab 30 minutit).

Kui tekib küsimusi, siis vaata uuesti punkte alates 12.

www.cgm.ee
www.linusmedical.ee

